




Montagehandleiding Armlegger

TriflexAIR Stoel

AS-79-180412


1

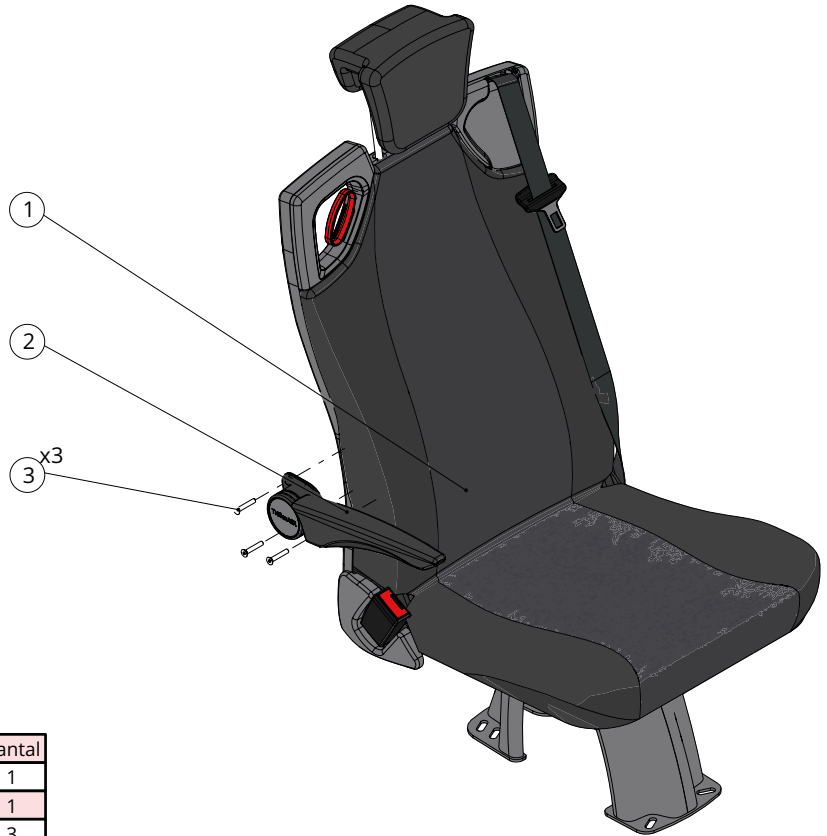

Item	Artikel nr.	Omschrijving	Aantal
1	V-0000553003	TriflexAIR with support	1
2	0000553453	Armlegger TriflexAIR rechts	1
3	I-00005530068	Verzonken inbusbout M6x35	3


Onderdelenlijst.

2

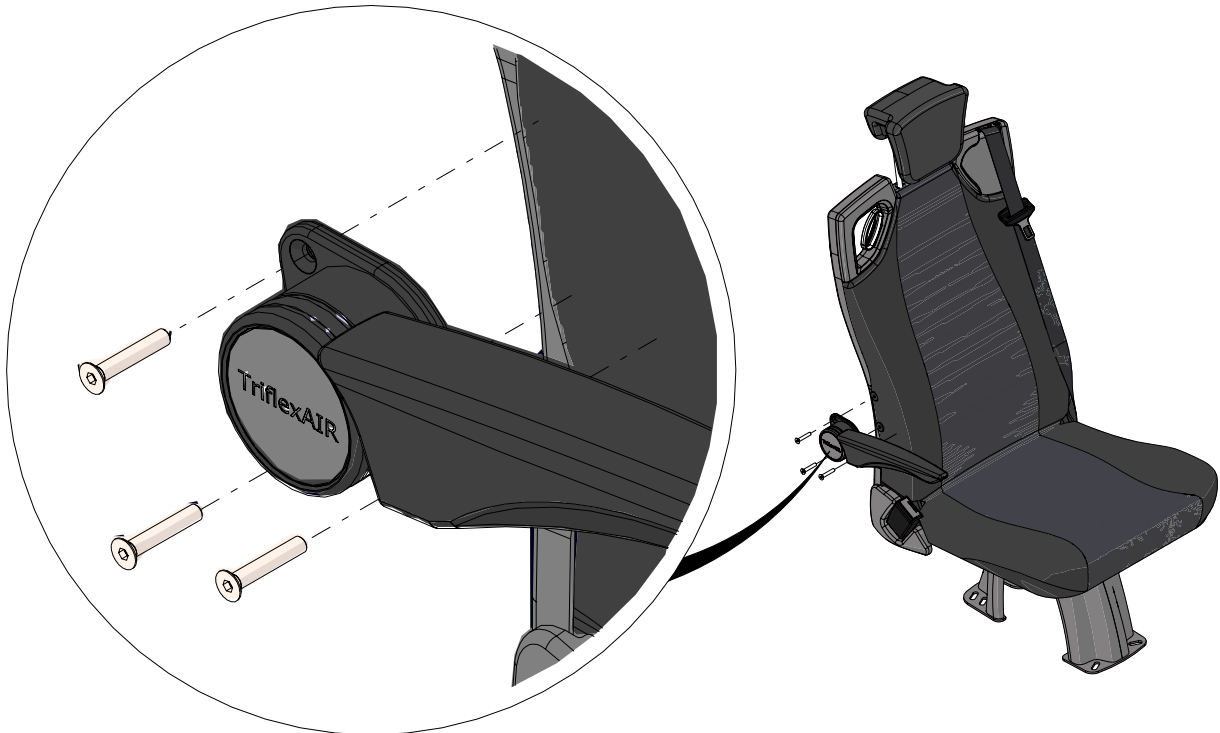


Exploded view.

3

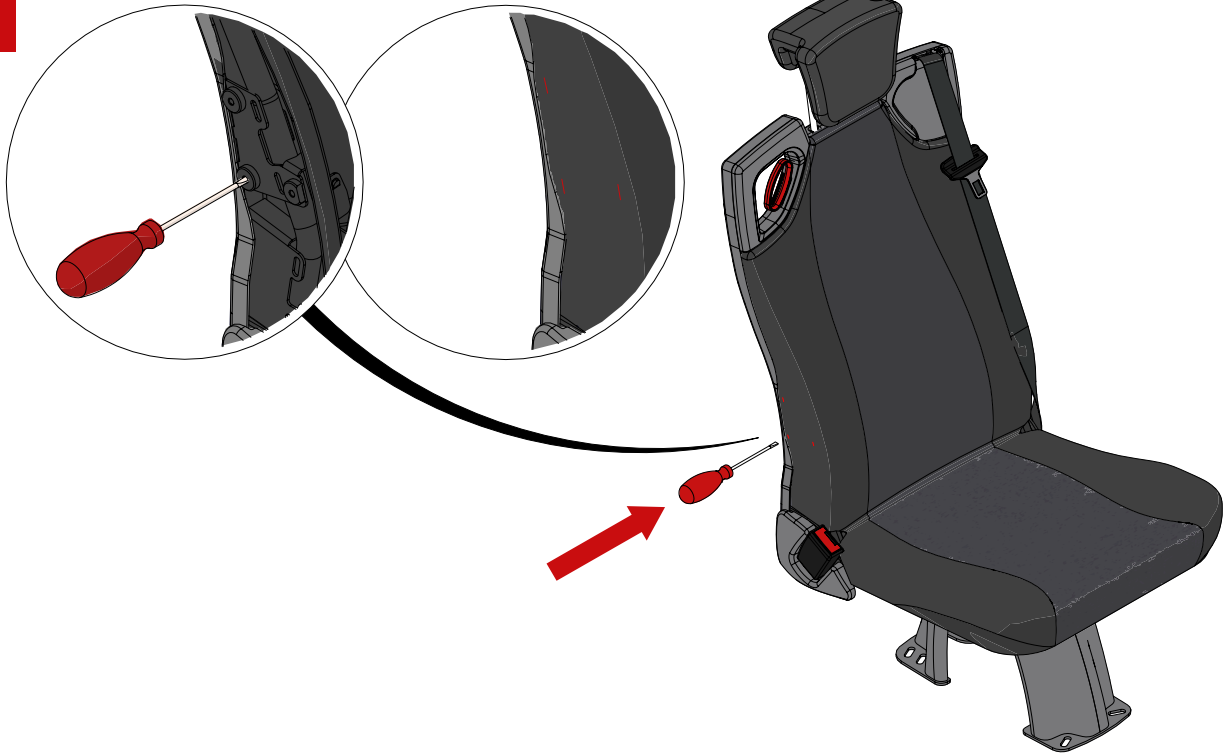


Zoek en markeer de montagepunten van de draadbussen; prik de bekleding door met b.v. een schroevendraaier.

4

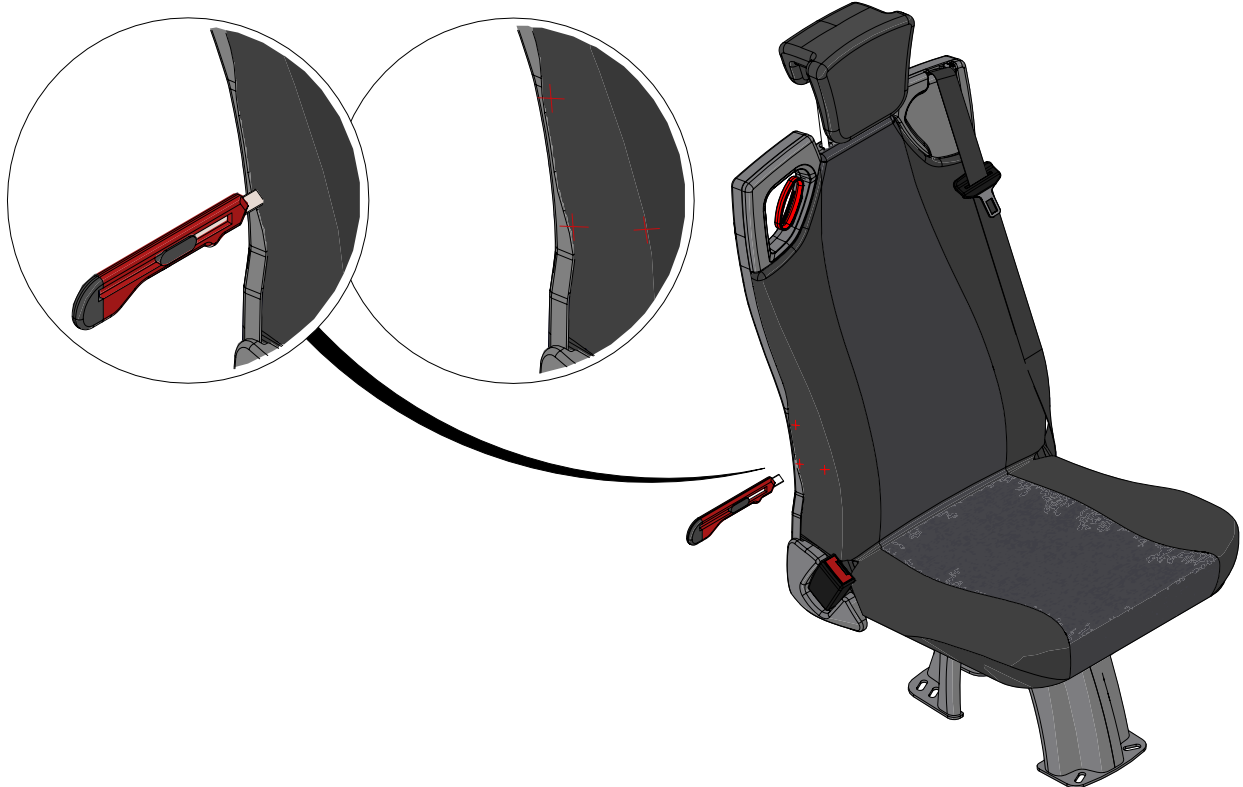


Snijd vervolgens een + vorm en zorg ervoor dat de bouten gangbaar zijn.

5

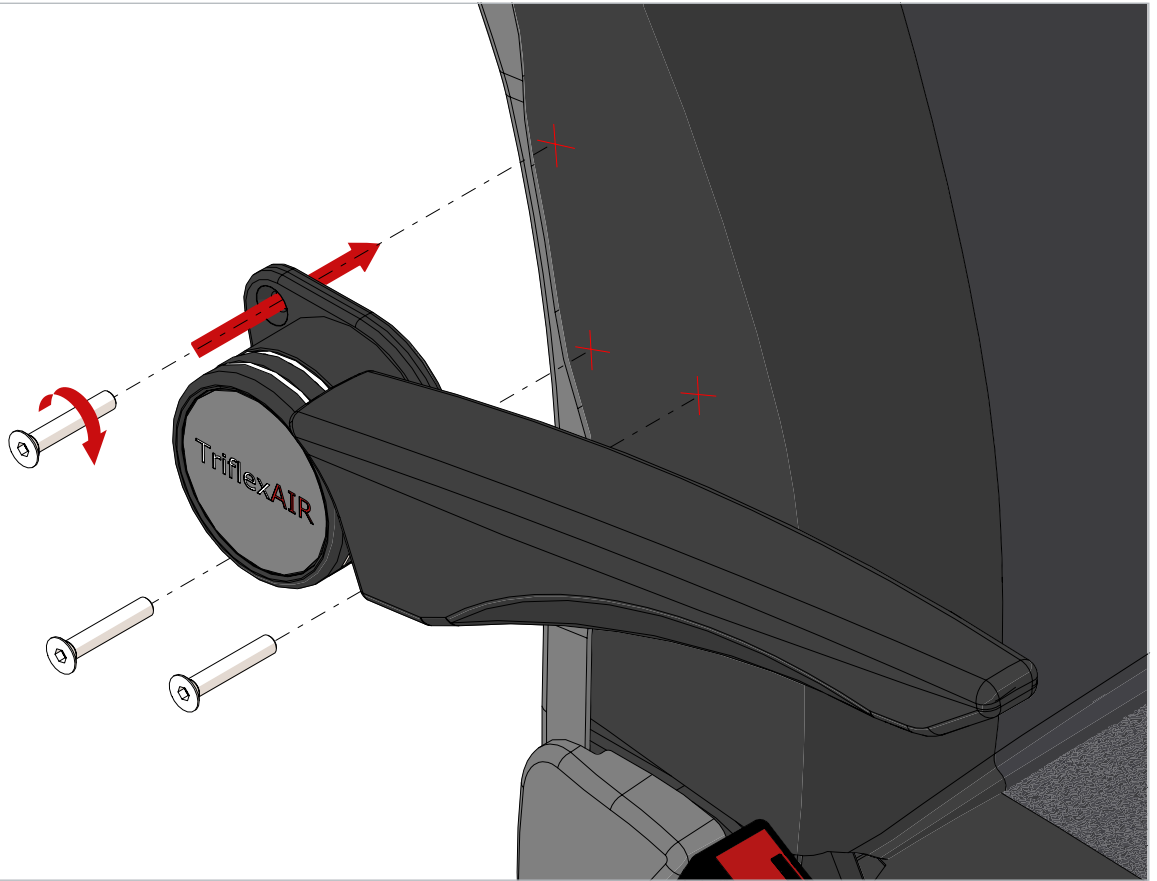


6

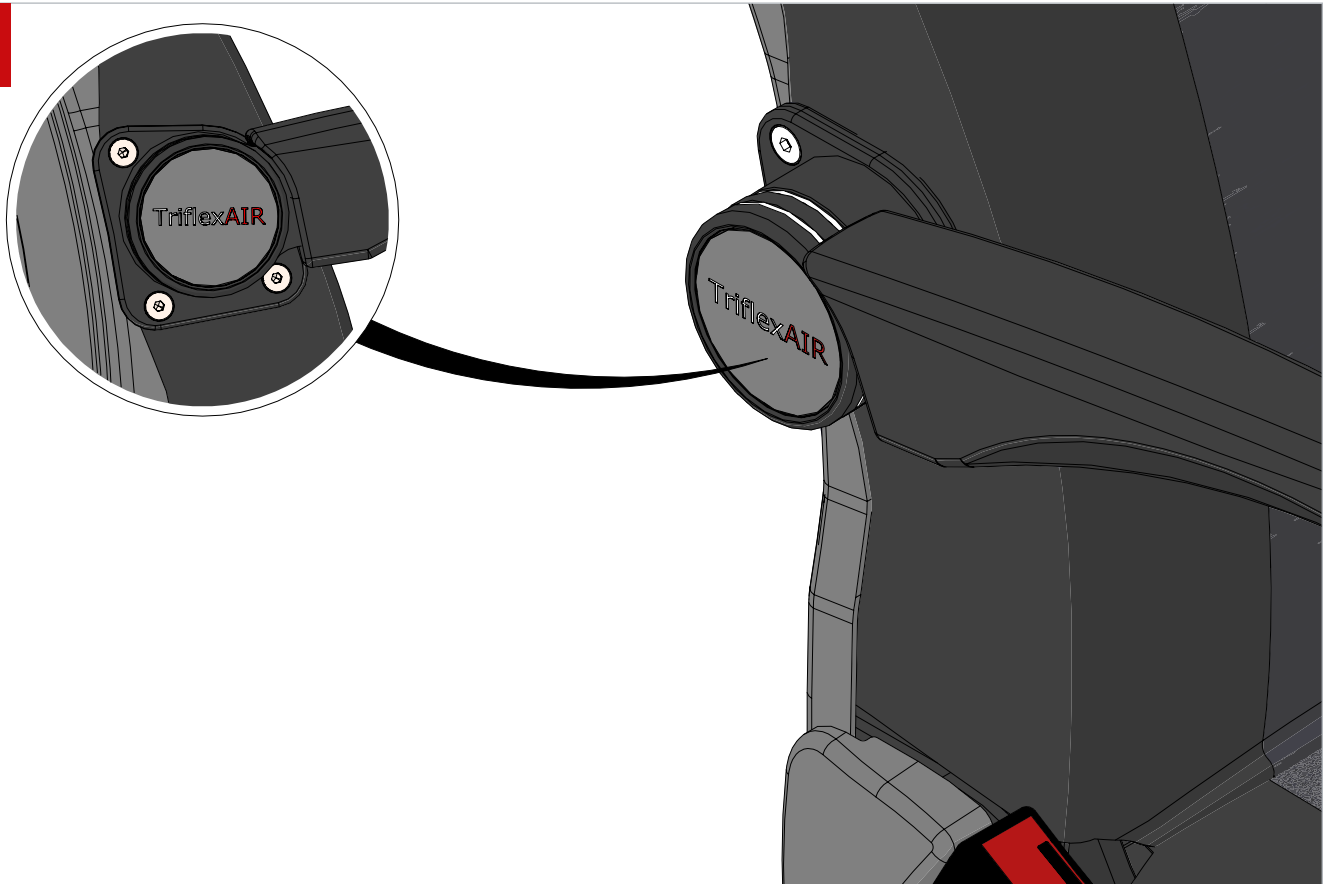

Fixeer nu de armlegger met de bijgevoegde verzonken bouten.

7

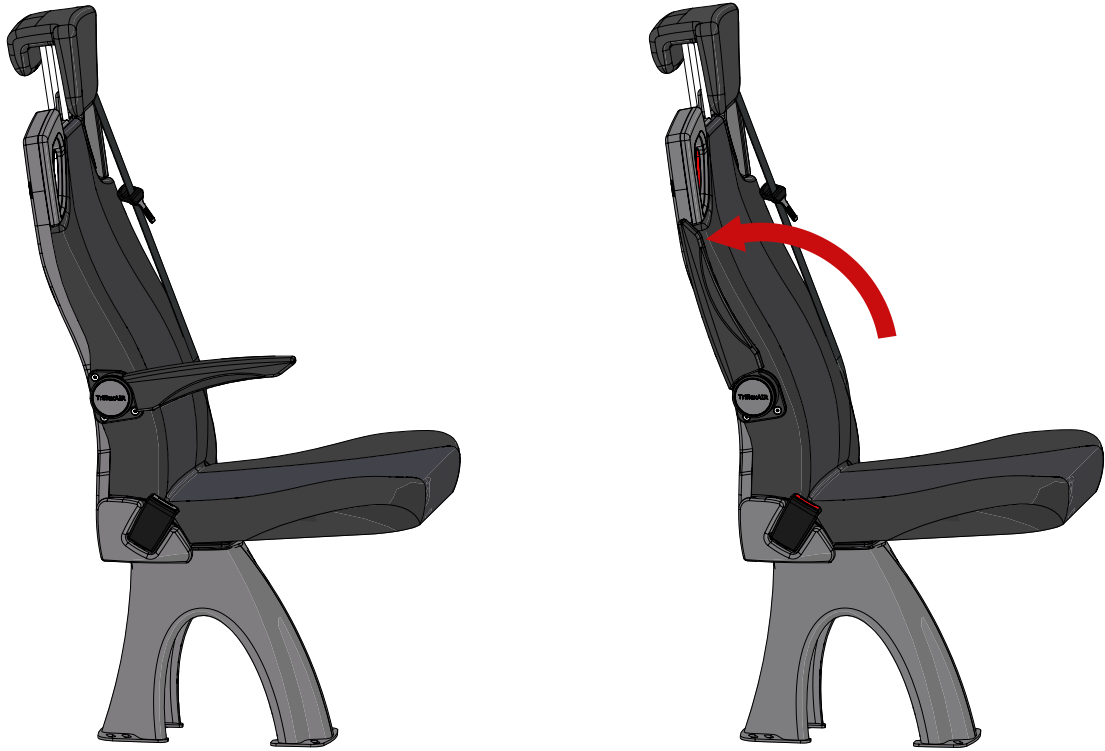

Controleer de opklapfunctie van de armlegger.

8



AS-79-180412

4 van 4